

# Dia Pro®

Across Auto System octo-m



[diapro.com.tr](http://diapro.com.tr)

# Across Auto System octo-m



## KAPASİTE

- 200 adet Across Gel® kartyükleme alanı
- 6 x 16 numune yüklem alanı
- 12 RBC yüklem alanı
- 4 adet 100 ml Across LISS ve/veya Bromelinaları

- 3 adet 96 çukurlu dilüsyon plak alanı
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj
- Atık kabı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sahip olduğu bağımsız 2 (iki) adet prob ile aynı anda iki testin birlikte çalışmasına olanak sağlamaktadır.
- Across Auto System octo-m cihazı test prosedür işlemlerinin tüm basamaklarını Walk-Away olarak gerçekleştirebilmektedir.
- Across Auto System octo-m cihazı tasarımı sayesinde çalışma esnasında testlerin durdurulmasına gereksinim olmadan sürekli yüklem özelliğine sahiptir.

- Random Access çalışabilme özeliği ile farklı testleri aynı anda yüklemenize olanak verir.
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör ve 24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj bölümlerinin sahip olduğu sezgisel yazılım ile testlerinizin en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır.
- Opsiyonel RBC soğutma bloğu ile hücreleriniz daha uzun süre stabil kalmasını sağlayacaktır.
- 98/79/EC numaralı IVD direktifi uyarınca CE uyumlu




### SERVİS DESTEĞİ

Ulusal ya da uluslararası satış sonrası yüksek kaliteli hizmet ve destek için, Dia Pro ya da yetkili distribütör ile doğrudan irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.



Ref. No: 900200

# Kullanıcı dostu octo-m




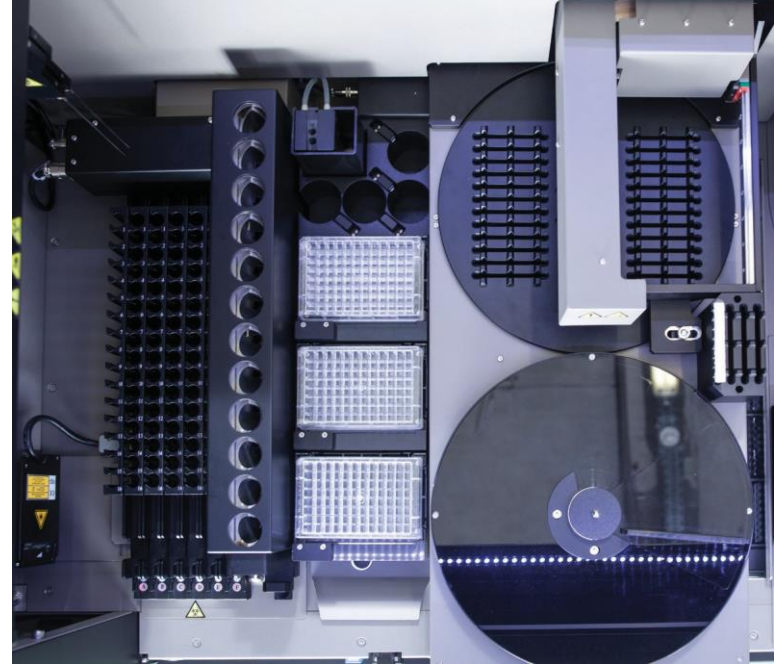


- Sahip olduğu kart okuyucusu ile çalışmış olan testlerin orijinal renkli görüntüleri üzerinden sonuçlarını otomatik olarak değerlendirmektedir.
- Çift yönlü otomasyon bağlantısı ile hataların oluşmasına izin vermemektedir.
- Öncelikli numune/numunelere farklı bir açıdan bakarak Acil Numune ve Stat Numune giriş özelliği ile farklılık yaratmaktadır.
- Sisteme erişim parola denetimi ile yapılmakta olup, test sonucunda ikinci kez yapılan değişikliklerde, değişikliği sağlayan ID ve işlemin yapıldığı tarih ve zaman dilimlerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

- Gerçek zamanlı olarak yüklü olan testlerin durumu ve kalan süreleri hakkında gerekli bilgileri sunmaktadır.
- Geniş test paneline sahip olması yanında istenilen yeni test panellerine hızlı cevap verebilmektedir.
- Refleks Test özelliği ile Zayıf D/ Parsiyel D, Lectin A1-Anti H, Anitkor Titrasyon v.b. testleri otomatik olarak çalışabilmektedir.
- İstenilen tarihler içerisinde tek veya çoklu test türlerine göre sayısal rapor verebilmektedir.
- Uzaktan erişim özelliğine sahiptir.
- Kullanılmakta olunan ülkenin dilinde çalışabilme özelliğine sahiptir.
- Saatte ortalama 360 test hızına sahiptir.

## TEST YÖNTEMLERİ

- Forward Gruplandırma
- Forward & Reverse Gruplandırma
- Reverse Gruplandırma
- Rh ve Rh alt Gruplandırma
- Direkt Coombs
- Cross Match
- Antikor Tarama
- Antikor Tanımlama
- Antikor Titrasyon
- Zayıf D / ParsiyelD
- Minör Antijen Testleri

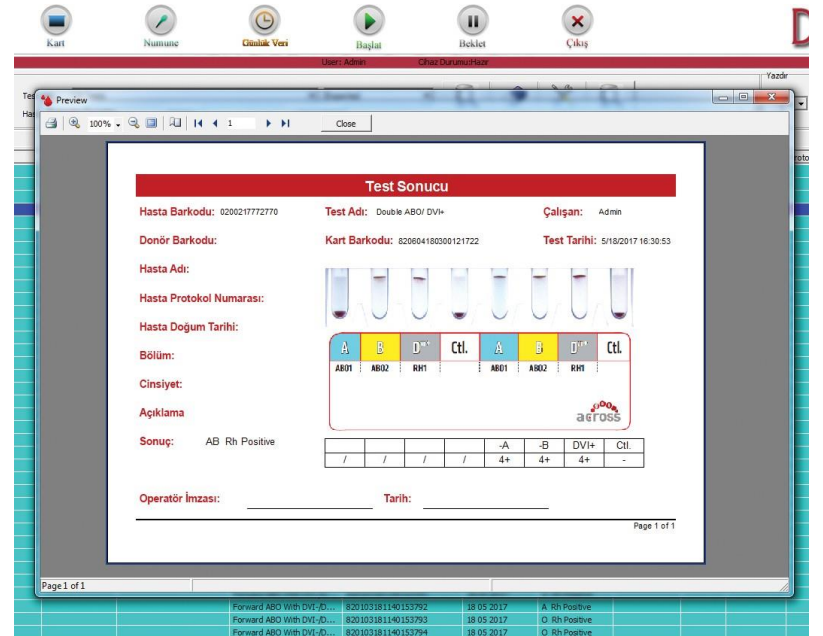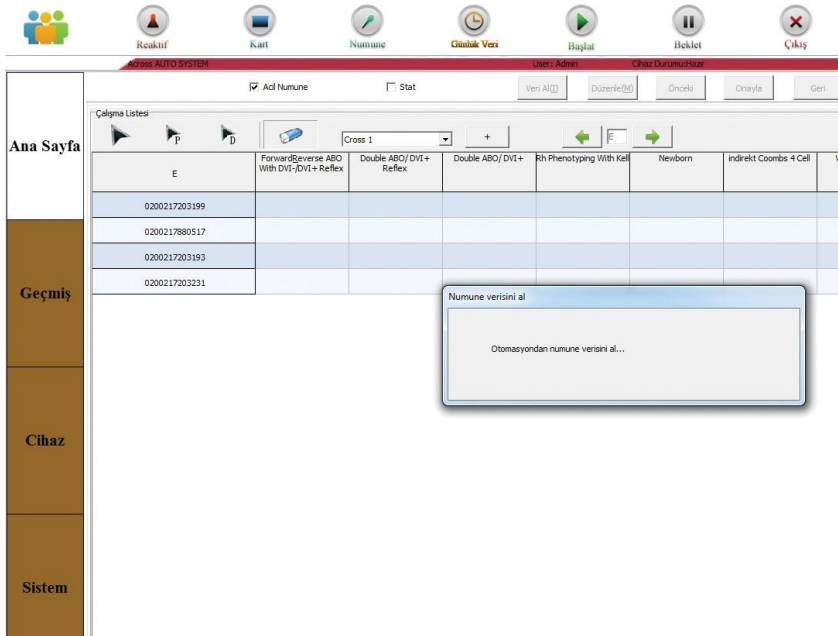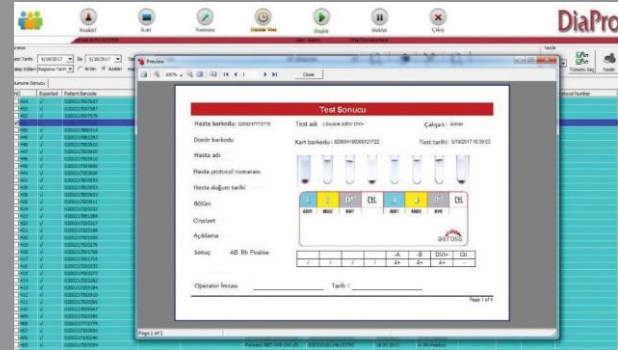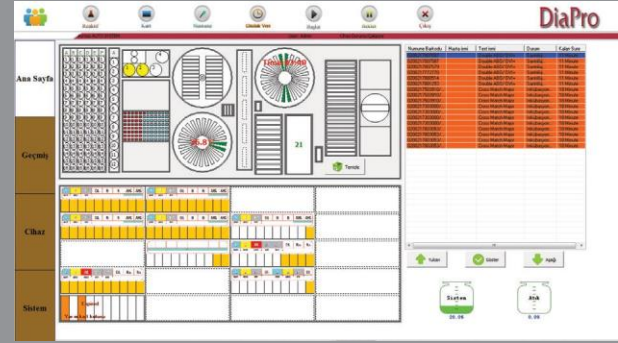

# Dia Pro®

Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez / HeadOffice

Barbaros Mah. Tophaneliođlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye  
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail: [diapro@diapro.com.tr](mailto:diapro@diapro.com.tr)

Fabrika /Factory

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye  
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: [diapro@diapro.com.tr](mailto:diapro@diapro.com.tr)



[www.diapro.com.tr](http://www.diapro.com.tr)