

Dia Pro®

Manuel Sistem Ürün Katalođu



diapro.com.tr



• Manuel Sistem

Manuel Sistem



Across System® Pipette

- Tek çekimle 50 x 8, 25 x 16 10 x 40 mikrolitre kapasitesi ile pipetleme
- Kullanılan pipet ucu sayesinde t est tüplerinin tabanına kolay ulaşım
- Tek kullanımlık pipet uçları hızlı ve güvenli bir şekilde çıkartılabilir
- Ergonomik tasarım ile sağ - sol elle kullanıma uygundur

Ref. No: 900120



Across System® Dispenser

- Hızlı ve güvenilir kullanım
- 100 ml ve 500 ml şişeler ile kullanabilme

Ref. No: 900130



Across System® Workstation

- 12/18/24 adet Across Gel® kartkapasiteli
- Bir adet 100 ml Across LISS alanı
- Bir adet 500 ml Across LISS alanı
- Bir adet 25 ml Across Bromelin alanı
- Sekiz adet RBC şişe alanı
- 36/54/72 adet süspansiyon hazırlama tüp alanı
- Sağ ve Sol el ile çalışmaya uygun hareketli yükleme

Ref. No: 900140



Across System®
Card Centrifuge



- 24 adet Across Gel® kart kapasitesine sahiptir.
- Across Gel® kartlar için optimize edilmiş hız ve süre ayarlıdır.
- Dengesiz yükleme, elektrik kesintisi veya işlem süresinin bitmesi durumunda görsel ve sesli uyarı verebilmektedir.
- Dijital ekranda kalan işlem süresi ve santrifüj hızı gösterebilmektedir.
- Çıkarılabilir ve değiştirilebilir rotor ve kart yuvaları

Ref. No: 900100



Across System®
Card Incubator


- 24 adet Across Gel® kart kapasitesine sahiptir.
- Across System® Card Incubator sahip olduğu 12 adet Across Gel® kart kapasiteli 2 ayrı blok birbirinden bağımsız olarak çalışabilmektedir.
- Across Gel® kartları için önceden ayarlanmış 37 °C sıcaklık derece ve 15 dakikaya ayarlıdır. istenilmesi durumunda sıcaklık ve süre değiştirilebilir.
- İki ayrı blok için tasarlanmış olan dijital ekran üzerinde kalan işlem süresini ve sıcaklık değerlerini göstermektedir.
- Elektrik kesintisi veya işlem süresinin bitmesi durumunda görsel ve sesli uyarı verebilmektedir.

Ref. No: 900110



Across System® Kart Okuyucu

Ref. No: 900160

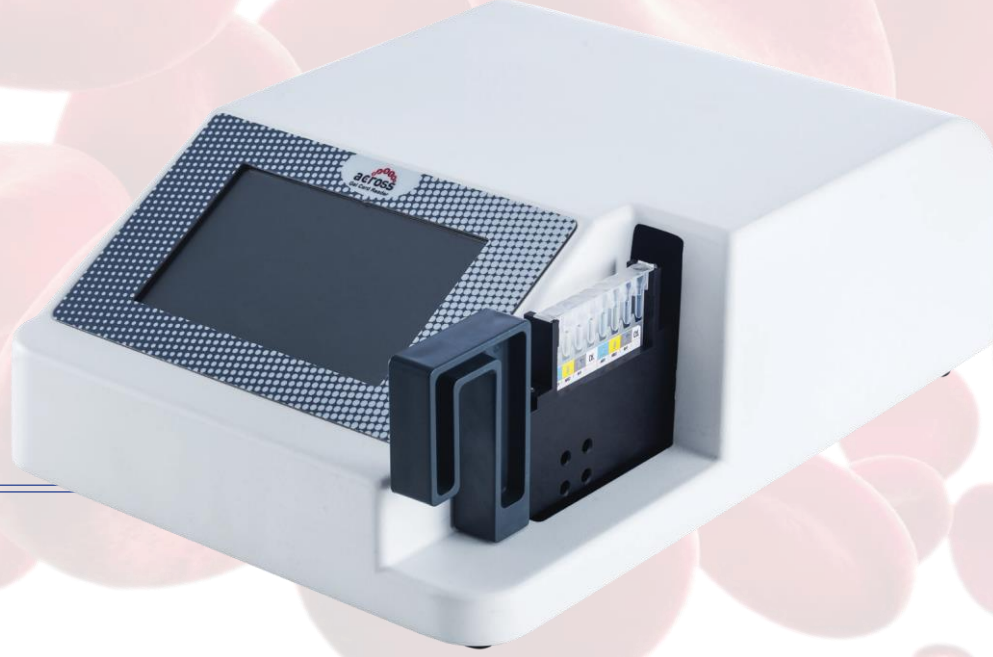

Genel Özellikler

- Across System® Card Reader özel işletim sistemi ile benzersiz kompakt tasarıma sahip olup en küçük alanlarda kendine yer bulabilmektedir.
- Across System® Card Reader sahip olduğu yazılım sayesinde; Across Gel® kartlarının barkodlarından kart ve test türünü algılayarak yorumlamayı otomatik olarak kullanıcı müdahalesi olmadan gerçekleştirebilmektedir. Across System® Card Reader sahip olduğu CCD kamera sayesinde Across Gel® kartlarının orjinal görüntüsü üzerinden mikrotüpler içerisindeki aglütinasyonları algılayabilmektedir.

- Across System® Card Reader, otomatik olarak gerçekleştirdiği Across Gel® kart/test değerlendirmesi istenilmesi durumunda DOKUNMATİK EKRANI ile kullanıcı müdahalesine izin vermektedir.
- Across System® Card Reader' ı otomasyon sistemlerine çift yönlü olarak bağlayabilirsiniz. İstemeniz durumunda test sonuçlarınız ile birlikte Across Gel® kart görüntüsü de otomasyon sistemine aktarabilirsiniz.



Kart Barkod No: 820108181180165560 01.01.2017 Geri

Hasta Adı Soyadı: Donör Adı Soyadı:
 Barkod: Barkod:

Hasta-2

Test : Across Gel® Forward Reverse ABO with Dvi-/Dvi+
 Sonuç : AB RH Negative

A B AB Dvi- Dvi+ CTL A1 B

4+ 4+ 4+ - - - - -

Kaydet

Adı Soyadı/
Barkod: hasta-23 Geri

Test Adı:

Tarih: 02.01.2017 - 05.01.2017 Bul

Lis Düzenle Temizle Rapor Sonuç Oku

Tümünü Seç

Seç	Adı Soyadı/Barkod	Sonuç	Tarih
<input checked="" type="checkbox"/>	hasta-23	Indirect Coombs Positive	05.01.2017

Hızlı Ve Kolay Yönetim

- Tek tık ile otomasyona veri gönderimi.
- Üstün arşivleme yeteneği ile tüm çalışmalarınız güvenli bir şekilde saklamaktadır. Belirlenen tarih içerisinde hasta / hastaların bir veya birden fazla test sonucuna ulaşılabilir.

- Test sonuçlarını istenilirse Across Gel® Kart görüntüsü ile alınabileceği gibi sadece rapor formatında da alınabilir.
- Across System® Card Reader sahip olduğu çoklu dil tercihi ile sizlere en iyi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmete bir tık ile ulaşabilirsiniz.
- Uzaktan erişim özelliğine sahiptir.

Dia Pro®

Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez / HeadOffice

Barbaros Mah. Tophaneliođlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail: diapro@diapro.com.tr

Fabrika /Factory

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: diapro@diapro.com.tr



www.diapro.com.tr