

# Dia Pro®

Across Manuel Sistem











### AcrossSystem® Card Centrifuge



- 24 adet Across Gel® kart kapasitesine sahiptir.
- Across Gel® kartlar için optimize edilmiş hız ve süre ayarlıdır.
- Dengesiz yükleme, elektrik kesintisi veya işlem süresinin bitmesi durumunda görsel ve sesli uyarı verebilmektedir.
- Dijital ekranda kalan işlem süresi ve santrifüj hızı gösterebilmektedir.
- Çıkarılabilir ve değiştirilebilir rotor ve kart yuvaları

Ref. No: 900100



### AcrossSystem® Card Incubator



- 24 adet Across Gel® kart kapasitesine sahiptir.
- Across System® Card Incubator sahip olduğu 12 adet Across Gel® kart kapasiteli 2 ayrı blok birbirinden bağımsız olarak çalışabilmektedir.
- Across Gel® kartları için önceden ayarlanmış 37 °C sıcaklık derece ve 15 dakikaya ayarlıdır. istenilmesi durumunda sıcaklık ve süredeğiştirilebilir.
- İki ayrı blok için tasarlanmış olan dijital ekran üzerinde kalan işlem süresini ve sıcaklık değerlerini göstermektedir.
- Elektrik kesintisi veya işlem süresinin bitmesi durumunda görsel ve sesli uyarı verebilmektedir.

Ref. No: 900110

## Manuel Sistem



### AcrossSystem® Pipette

---

- Tek çekimle 50 x 8,25 x 16 10 x 40 mikrolitre kapasitesi ile pipetleme
- Kullanılan pipet ucu sayesinde test tüplerinin tabanına kolay ulaşım
- Tek kullanımlık pipet uçları hızlı ve güvenli bir şekilde çıkartılabilir
- Ergonomik tasarım ile sağ - sol elle kullanıma uygundur

Ref. No: 900120



### AcrossSystem® Dispenser

---

- Hızlı ve güvenilir kullanım
- 100 ml ve 500 ml şişeler ile kullanabilme

Ref. No: 900130



### AcrossSystem® Workstation

---


- 12/18/24 adet Across Gel® kartkapasiteli
- Bir adet 100 ml Across LISS alanı
- Bir adet 500 ml Across LISS alanı
- Bir adet 25 ml Across Bromeline alanı
- Sekiz adet RBC şişe alanı
- 36/54/72 adet süspansiyon hazırlama tüp alanı
- Sağ ve Sol el ile çalışmaya uygun hareketli yükleme alanları

Ref. No: 900140



## AcrossSystem® Kart Okuyucu

Ref. No: 900160

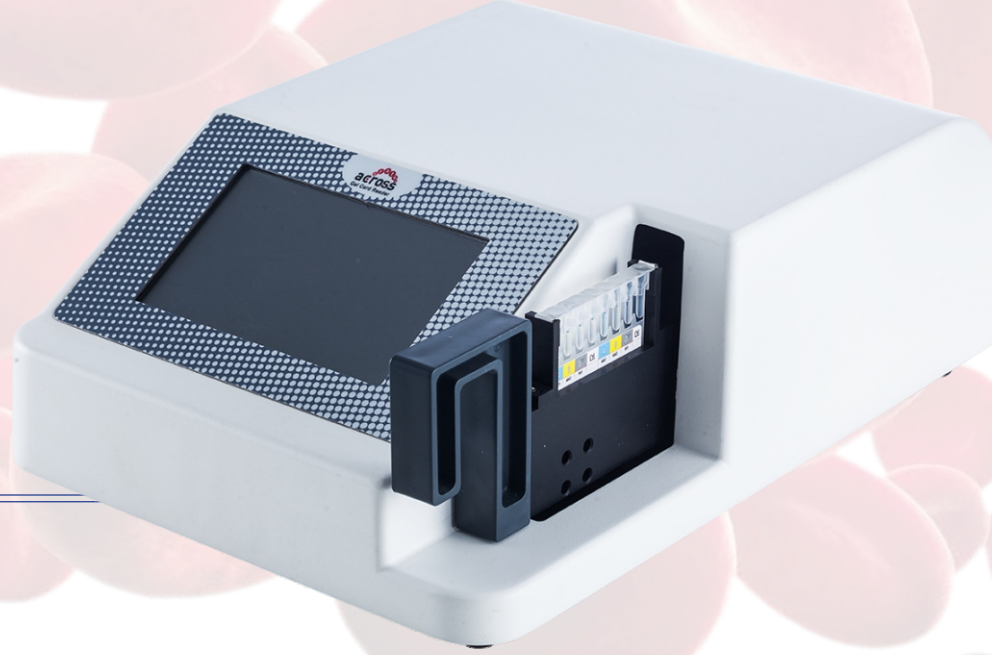

### Genel Özellikler

- Across System® Card Reader özel işletim sistemi ile benzersiz kompakt tasarıma sahip olup en küçük alanlarda kendine yer bulabilmektedir.
- Across System® Card Reader sahip olduğu yazılım sayesinde; Across Gel® kartlarının barkodlarından kart ve test türünü algılayarak yorumlamayı otomatik olarak kullanıcı müdahalesi olmadan gerçekleştirebilmektedir. Across System® Card Reader sahip olduğu CCD kamera sayesinde Across Gel® kartlarının orjinal görüntüsü üzerinden mikrotüpler içerisindeki aglütinasyonları algılayabilmektedir.

- Across System® Card Reader, otomatik olarak gerçekleştirdiği Across Gel® kart/test değerlendirmesi istenilmesi durumunda DOKUNMATİK EKRANI ile kullanıcı müdahalesine izin vermektedir.
- Across System® Card Reader' ı otomasyon sistemlerine çift yönlü olarak bağlayabilirsiniz. İstemeniz durumunda test sonuçlarınız ile birlikte Across Gel® kart görüntüsü de otomasyon sistemine aktarabilirsiniz.



# Dia Pro®

Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez / HeadOffice

Barbaros Mah. Tophaneliođlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye  
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail: [diapro@diapro.com.tr](mailto:diapro@diapro.com.tr)

Fabrika /Factory

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye  
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: [diapro@diapro.com.tr](mailto:diapro@diapro.com.tr)



TK1784

[www.diapro.com.tr](http://www.diapro.com.tr)