

Dia Pro®

Across Auto Sistem octo-m







Across Auto System octo-m



KAPASİTE

- 200 adet Across Gel® kart yükleme alanı
- 6 x 16 numune yükleme alanı
- 12 RBC yükleme alanı
- 4 adet 100 ml Across LISS ve/veya Bromeline alanı

- 3 adet 96 çukurlu dilüsyon plak alanı
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj
- Atık kabı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sahip olduğu bağımsız 2 (iki) adet prob ile aynı anda iki testin birlikte çalışmasına olanak sağlamaktadır.
- Across Auto System octo-m cihazı test prosedür işlemlerinin tüm basamaklarını walk-away olarak gerçekleştirebilmektedir.
- Across Auto System octo-m cihazı tasarımı sayesinde çalışma esnasında testlerin durdurulmasına gereksinim olmadan sürekli yükleme özelliğine sahiptir.

- Random Access çalışabilme özeliği ile farklı testleri aynı anda yüklemenize olanak verir.
- 24 adet Across Gel® kart kapasiteli inkübatör ve 24 adet Across Gel® kart kapasiteli santrifüj bölümlerinin sahip olduğu sezgisel yazılım ile testlerinizin en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır.
- Opsiyonel RBC soğutma bloğu ile hücreleriniz daha uzun süre stabil kalmasını sağlayacaktır.
- 98/79/EC numaralı IVD direktifi uyarınca CE uyumlu



SERVİS DESTEĞİ

Ulusal ya da uluslararası satış sonrası yüksek kaliteli hizmet ve destek için, Dia Pro ya da yetkili distribütör ile doğrudan irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.



Ref. No: 900200

Kullanıcı dostu octo-m




- Sahip olduğu kart okuyucusu ile çalışmış olan testlerin orijinal renkli görüntüleri üzerinden sonuçlarını otomatik olarak değerlendirmektedir.
- Çift yönlü otomasyon bağlantısı ile hataların oluşmasına izinvermemektedir.
- Öncelikli numune/numunelere farklı bir açıdan bakarak Acil Numune ve Stat Numune giriş özelliği ile farklılık yaratmaktadır.
- Sisteme erişim parola denetimi ile yapılmakta olup, test sonucunda ikinci kez yapılan değişikliklerde, değişikliği sağlayan ID ve işlemin yapıldığı tarih ve zaman dilimlerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

- Gerçek zamanlı olarak yüklü olan testlerin durumu ve kalan süreleri hakkında gerekli bilgileri sunmaktadır.
- Geniş test paneline sahip olması yanında istenilen yeni test panellerine hızlı cevap verebilmektedir.
- Refleks Test özelliği ile Zayıf D, Parsiyel D, Lectin A1, Anti H, Anitkor Titrasyon v.b. testleri otomatik olarak çalışabilmektedir.
- İstenilen tarihler içerisinde tek veya çoklu test türlerine göre sayısal rapor verebilmektedir.
- Uzaktan erişim özelliğine sahiptir.
- Kullanılmakta olunan ülkenin dilinde çalışabilme özelliğine sahiptir.
- Saatte ortalama 360 test hızına sahiptir.

TEST YÖNTEMLERİ

- Forward Gruplandırma
- Forward & Reverse Gruplandırma
- Reverse Gruplandırma
- Rh ve Rh alt Gruplandırma
- Direkt Coombs
- Cross Match
- Antikor Tarama
- Antikor Tanımlama
- Antikor Titrasyon
- Zayıf D / Parsiyel D
- Minör Antijen Testleri

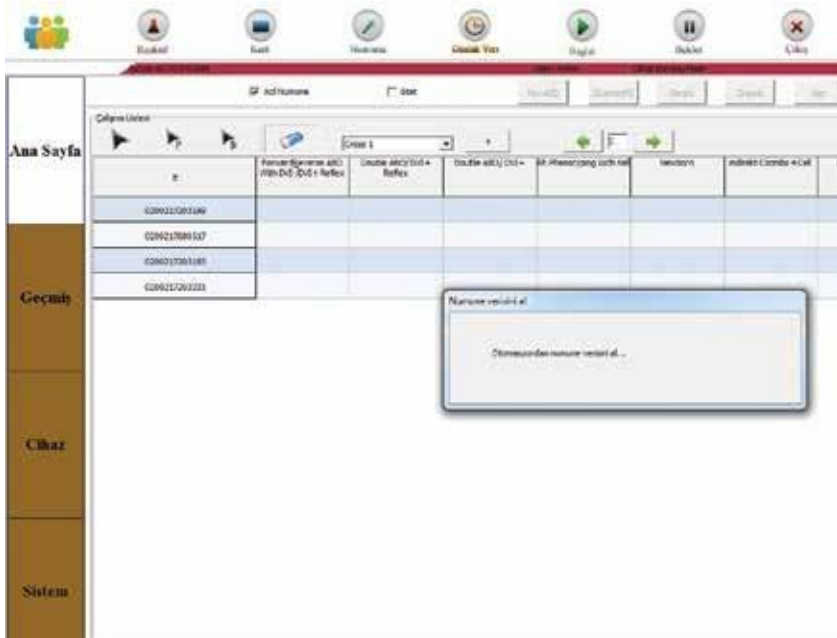

Geniř test parametreleri
**kolaylık ve zaman
kazandırır!**



Dia Pro®

Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez / HeadOffice

Barbaros Mah. Tophaneliođlu Cad. Işık Apt No: 70/1 PK 34662 Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 326 70 42 • Faks: +90 (216) 340 16 89 • e-mail: diapro@diapro.com.tr

Fabrika /Factory

İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Atatürk Blv. No:25/1 PK 41400 Gebze - Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 (262) 751 53 34 • Faks: +90 (262) 751 53 37 • e-mail: diapro@diapro.com.tr



TK1778

www.diapro.com.tr